




Autoclave totalmente automático con 4 programas para diferentes aplicaciones y usos. Capacidad de 80 litros.



**PANEL DE CONTROL**

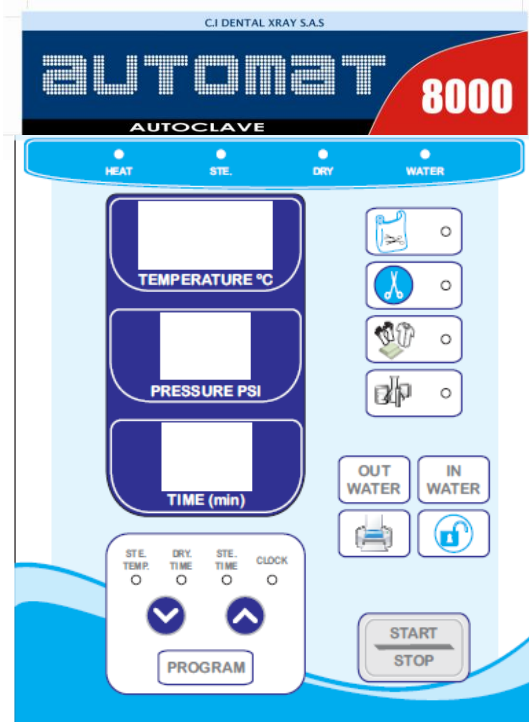

**CARACTERISTICAS**

- Garantía absoluta por 1 año en cambio de componentes y repuestos.
- Soporte técnico adicional por 3 años de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Control por microprocesador de temperatura y presión.
- Cuatro programas: Instrumental empacado, instrumental libre, telas y líquidos.
- Tanque de reserva de agua con sensores de nivel.
- Válvula de seguridad.
- Alarma de sobrecalentamiento.
- Alarma de errores durante el ciclo de esterilización.
- Ciclo de secado automático.
- Cámara de acero inoxidable.
- 3 bandejas.
- Conexión con USB o impresora para registro del ciclo.

**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS DEL EQUIPO**

Modelo	AUTOMAT 8000
Fabricante	C.I Dental X Ray S.A.S
Capacidad	80 litros
Corriente de Entrada:	20 Amp
Consumo de Potencia	3000 Vatios
Breakers del Circuito	30Amp
Voltaje de la línea	220V
Frecuencia de la línea	50 - 60Hz
Medidas	Ancho: 70.5 cm Alto: 58 cm Largo: 99 cm
Medidas internas de la cámara	Diámetro: 38 cm Profundidad: 70 cm



## FICHA TECNICA AUTOCLAVE AUTOMÁT 8000

CÓDIGO: FT-14  
VERSIÓN: 02  
FECHA: Junio 13 de  
2011

### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura de operación	121°C
Presión de trabajo:	18 – 22 psi
Presión Máxima:	30 psi.

OPCIÓN DE REGISTRO DE VALIDACIÓN  
CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL  
COMPUTADOR CON PUERTO USB.



Esta opción reemplaza la impresora, para el registro de los datos se transmite la información de validación del ciclo directamente a un computador, conectado a través de un puerto USB, en el cual se instala un programa donde podrá almacenar los datos y consultarlos en cualquier momento.



### CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA PARA REGISTRO DE CICLO:

Impresora térmica de papel continuo, imprime el tipo de programa, la fecha y hora de inicio del ciclo, la temperatura y el tiempo de todo el ciclo de esterilización.

Si durante el ciclo se produjo algún error o anomalía que no permita estar seguros de la validez del ciclo de esterilización, esto quedará reflejado en el informe; por el contrario, si el ciclo fue exitoso, se imprime el mensaje "Esterilización OK".

Utiliza papel estándar de 50mm x 57mm.

