

Descripción: El **AstroScaler®** está diseñado y equipado con los mejores componentes para obtener los mejores resultados clínicos posibles. El movimiento de la punta **AstroScaler®** es en una frecuencia ultrasónica y tiene una sorprendente baja amplitud (10 veces menor que otros scaler ultrasónicos) lo cual provee una combinación excepcional de alta frecuencia y baja amplitud para dar unos excelentes resultados clínicos y reducir la inconformidad y traumatismo del paciente.



Especificaciones técnicas

Pieza de mano		Adaptador de voltaje	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	24 Volts	VOLTAJE ENTRADA:	110V, 60 Hz
DIMENSIONES:	Alto: 50 mm Ancho: 10 mm Largo: 17 mm	VOLTAJE DE SALIDA:	24
FRECUENCIA	24 – 34 KHz	CORRIENTE DE SALIDA:	1.3A
PRESIÓN	35 Psi	DIMENSIONES:	Alto: 65 mm Ancho: 75 mm Largo: 120 mm

Características:


Las puntas son totalmente esterilizables, proporcionando así un inigualable nivel de seguridad.

PUNTAS

El equipo incluye 3 puntas especiales para periodoncia y profilaxis.



También se puede adquirir el Kit para endodoncia el cual tiene un valor adicional.

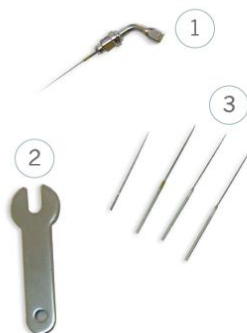

El kit para endodoncia consta de las siguientes partes:

1. Dispositivo o adaptador para acoplar las fresas de endodoncia al Scaler.
2. Llave para apretar el dispositivo 1.
3. Fresas o puntas para endodoncia.

Recuerde:

Periodo de garantía: 1 año